

Malsch
care design

BEDS
Seria Impulse

Paturi de îngrijire



care design

www.bettenmalsch.de





CALITATE ȘI SIGURANȚĂ

Seria Impulse oferă flexibilitate și securitate maximă. Cu o sarcină de lucru de 225 kg pentru paturile standard și 300 kg pentru cele cu solicitări sporite, stabilitatea și siguranța deplină sunt garantate, inclusiv în timpul rotirii.

Paturile din seria respectivă corespund cerințelor actuale de siguranță. Utilizarea materialelor de înaltă calitate, conferă produselor noastre robustețe și durabilitate.



Health
made in Germany

CONCEPT DE ACȚIONARE INOVATOR

Sistemul nostru la joasă tensiune, de 24V, oferă mai multă siguranță pacienților și personalului medical. Pentru a evita deteriorarea patului sau rănirea personalului, paturile noastre dispun la rotire de o protecție anti-coliziune, permițând reglarea pe înălțime numai din poziția de transfer. De asemenea, la extensie se asigură o gardă la sol suficientă.

Comutatorul manual de siguranță îmbină funcțiile telecomenzii și a panoului de control, oferind posibilitatea de blocare selectivă pe 3 nivele. Se poate alege între modul de întreținere, de blocare sau modul utilizator.

Pentru mai multă ordine și curățare mai ușoară, noul nostru concept de cablu prevede un singur cablu conector pentru un pat. Design-ul modular al cablajului permite extinderea sistemului de acționare existent cu componente suplimentare, fără o sursă de curent suplimentară.

ÎN REZUMAT

- › Sistem de joasă tensiune de 24V pentru o mai mare siguranță a pacienților și a personalului de îngrijire
- › Protecție anti-coliziune în timpul pivotării patului din poziția cea mai de jos, pentru evitarea deteriorării și a accidentărilor
- › Tastă de transfer pentru urcare sau coborâre la înălțimea normală de ședere.*
- › Telecomandă cu blocare selectivă a funcțiilor de reglare pe trei nivele pentru siguranță individuală
- › Design simplu al cablajului pentru a preveni încurcarea




* nu se aplică la Impulse Ambiente și Impulse XL



ACCESORII SUPLIMENTARE DISPONIBILE OPȚIONAL

- › Baterie care asigură funcțiile patului fără alimentare externă
- › Lampă de veghe (de sub pat) cu senzor crepuscular și de mișcare
- › Lampă de citit fără transformator suplimentar de alimentare

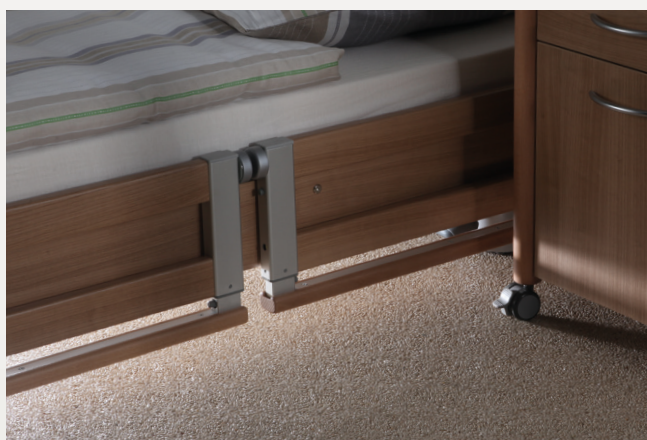

CONCEPT DE AJUSTARE PE 4 NIVELE

1

Poziție joasă



Paturile noastre cu poziție joasă, Impulse 400 și Impulse 400 LR100, pot fi reglate de pe telecomandă la un nivel optim pentru urcarea și coborârea din pat, prevenind astfel căderea pacienților. Tasta poate fi dezactivată de la butonul de dezactivare de pe telecomandă.

2

Poziție de transfer



Poziția de transfer preprogramată, ușor de accesat cu butonul de transfer, permite, în combinație cu lateralele de protecție mobile, urcarea și coborârea facilă din poziția de ședere.

3

Înălțime de lucru pentru îngrijirea curentă a pacienților



Sistemul de ajustare pe înălțime a patului permite personalului medical să-și desfășoare activitatea cu efort fizic minim. Prin ridicarea parțială a lateralelor, sistemul nostru de protecție previne căderea pacienților din pat, oferind în același timp personalului de îngrijire acces facil la pacient.

4

Confort în poziție de ședere




Această poziție oferă pacientului un confort optim în poziție de ședere, ideală pentru vizionare TV, hrănire și comunicare, influențează pozitiv orientarea spațială, respirația și circulația sanguină a acestuia. Sistemul inteligent de retractare a spătarului previne contactul pacientului cu tabla patului și diminuează presiunea pe zona coapselor.

+

CONFORT ÎN POZIȚIE ORIZONTALĂ

- › Somieră din 4-secțiuni cu compensator saltea
- › Suprafață rabatabilă ergonomică
- › Previne escarele
- › Reglare automată a secțiunilor spate și picioare pentru preluarea confortabilă a pacientului
- › Ridicare automată ușoară pentru o poziție confortabilă de ședere

MODELE DE SOMIERĂ

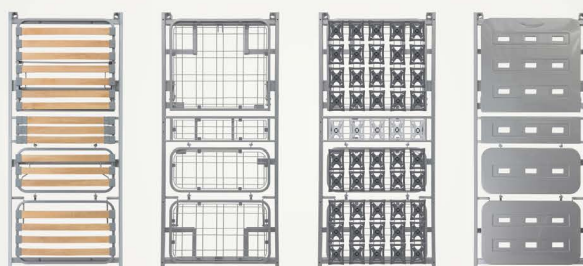

Grătare de lemn

Grile de metal

Konfort

Material plastic (ABS)

DESIGN COMUTATOR MANUAL

Imaginea reprezintă telecomanda pentru Impulse 400



+

SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE

- › Telecomandă manuală cu fir și funcție de blocare integrată
- › Blocare selectivă a funcțiilor de reglare pe trei niveluri de securitate individuală

+

CONFORT

- › Confort automat în poziție de ședere *
- › Ușurință în utilizare prin acționarea directă a tastelor
- › Economie de timp prin activarea simultană a mai multor funcții
- › Iluminare tastatură cu LED

+

MOBILIZAREA PACIENȚILOR

- › Tastă de transfer pentru reglarea la înălțimea optimă de ședere, pentru urcarea și coborârea din pat fără dificultate **
- › Ajustarea individuală a secțiunilor somierei în procesul de pivotare a patului.

* Nu se aplică la paturile Impulse XL


** Nu se aplică la paturile Impulse Ambiente și Impulse XL



REGLAREA SISTEMULUI DE BARE LATERALE

POZIȚIA DE TRANSFER

- › Ajustarea anatomică a lateralelor de protecție și a secțiunilor somierei
- › **Urcarea și coborârea din pat din poziția șezând pe segmentul mijlociu al somierei**, la înălțimea optimă data de tasta de transfer de pe telecomandă
- › Ajustarea elementelor laterale pe secțiunea cap
- › Sistemul de protecție laterală permite mobilitatea pacientului

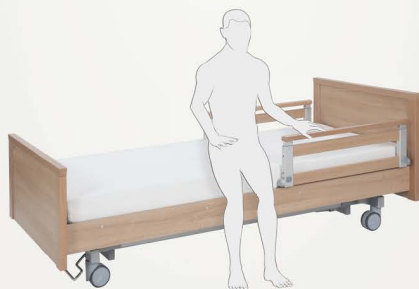

- › Protecție de jur împrejur prin reducerea măsurilor de restricționare a libertății de mișcare a pacientului
- › Utilizarea modulară a două sau patru elemente de protecție laterală permite o utilizare mai permisivă a patului
- › Stabilitate deplină la orice înălțime a barelor laterale



EXTENSIE DE PAT INTEGRATĂ

Flexibilitate maximă la extinderea integrată a somierei (10cm fără saltea și 20cm cu saltea). Riscul de coliziune la extindere se exclude.

Activarea se face fără unelte, prin două bolțuri de blocare. Cuzineții de înaltă calitate asigură maximum de stabilitate în starea de extensie.

Cu sistemul nostru de protecție laterală flexibilă oferim reducerea măsurilor de restricție a mobilității pacientului (FEM), prin renunțarea la mijloacele de protecție suplimentară. (În deplină conformitate cu normele DIN EN 60601-2-52)

SERIE IMPULSE

MULTIFUNCȚIONAL



IMPULSE 400

Soluția completă pentru toate aplicațiile:

- › Protecție împotriva căderii
- › Pentru îngrijire la domiciliu și în staționar
- › Paturi pentru îngrijire pacienți gravi
- › Reglare pe înălțimea de lucru - maxim **82 cm ***
- › Poziție joasă a somierei - **25 cm ***
- › Intrare optimă în poziția de transfer
- › Confort în poziție de ședere
- › Manevrabil pe orice nivel de înălțime
- › Roți pivotante 360°
- › Cadrul de pat robust
- › Frână centrală pentru roți, bilateral, operabilă intuitiv (intern)
- › Mecanism de frânare tip soft lock

SUPER MOBILITATE



IMPULSE 400 LR100

- › Protecție împotriva căderii
- › Pentru îngrijire la domiciliu și în staționar
- › Paturi pentru îngrijire pacienți gravi
- › Reglare pe înălțimea de lucru - maxim **82 cm ***
- › Poziție joasă a somierei - **26 cm ***
- › Intrare optimă în poziția de transfer
- › Confort în poziție de ședere
- › Adaptat pentru transportul pacientului
- › Mobilitate în orice poziție (pe înălțime)
- › Manevrabilitate ușoară
- › Roți pivotante 360°
- › Șasiu rezistent
- › Frână centrală pentru (4) roți cu funcție de stabilitate direcțională, integrată complet în șasiu
- › Mecanism de frânare tip soft lock

CONFORT CASNIC



IMPULSE AMBIENTE

- › **Pat pentru recuperare**
- › Reglare pe înălțimea de lucru - maxim **84 cm ***
- › Înălțime confortabilă pentru urcare/coborâre din pat - **37 cm ***
- › Confort în poziție de ședere
- › Stabilitate sigură
- › Roți blocate cu sarcină pe pat; patul se mobilizează doar fără ocupant
- › Mecanisme de frânare disimulate
- › **Opțional:**
- › Elemente de laterale pentru un plus de mobilitate
- › Cadrul patului

DURABILITATE MAXIMĂ



IMPULSE XL

- › **Pat bariatric**
- › Reglare pe înălțimea de lucru - maxim **83 cm ***
- › Înălțime confortabilă pentru urcare/coborâre din pat - **33 cm ***
- › Suprafață somierei 100cm x 200cm
- › Manevrabilitate facilă
- › Roți pivotante 360°
- › Capacitate maximă - **300kg**
- › Set de acționare cu 5 motoare
- › Frână centrală pentru (4) roți cu funcție de stabilitate direcțională, integrată complet în șasiu
- › Mecanism de frânare tip soft lock

* măsurată la partea de sus a somierei



O GAMĂ LARGĂ DE ACCESORII ȘI MOBILIER

Pentru întrebări despre mobilierul nostru și accesoriile, apălați-ne la numerele de telefon publicate.

Mai multe informații găsiți pe pagina noastră web www.malsch-international.ro de unde puteți descărca și catalogul on-line.



	Impulse	400	400 LR100	Ambiente	XL
Sasiul					
Roji anvelopate, cu mod de blocare pe fiecare roată	•	x	x	x	x
Support cu poziționarea electronică a roților	x	x	•	•	x
Frână centrală pentru (4) roți cu funcție de stabilitate direcțională, integrată complet în șasiu	x	•	x	•	•
Roji duble de 50 mm anvelopate cu cauciuc	•	x	•	•	x
Roji duble de 100 mm	x	•	x	•	•
Roji de 125 mm	x	o	x	o	o
Caracteristici de confort					
Confort în poziție de ședere	•	•	•	•	x
Autocontur	•	•	•	•	•
Mobilizarea pacienților					
Poziție de transfer	•	•	x	x	x
Trendelenburg-/Anti-Trendelenburg	•	•	•	•	x
Elemente laterale de protecție					
Laterale din grile pe toată lungimea	•	•	•	•	x
Laterale cu grile segmentate pe una din părți	o	o	o	o	x
Sistem de grile laterale modulabil	o	o	o	o	•
Securitate în utilizare					
Pat cu poziție foarte joasă pentru reducerea riscului căderii	•	•	x	x	x
Extensie pat					
Extensie pat integrată	o	o	o	o	x
Spațiu pentru lenjeria de pat (numai în combinație cu extensia patului integrată)	o	o	o	o	x
Somiera					
Lamele elastice din lemn stratificat	o	o	o	o	x
Grilaj metalic	•	•	•	•	•
Confort	o	o	o	o	x
Material plastic (ABS)	o	o	o	o	x
Înălțime de lucru					
Poziție joasă	82 cm	82 cm	84 cm	83 cm	
Sarcină de lucru în condiții de siguranță	25 cm	26 cm	37 cm	33 cm	
Dimensiuni exterioare pat	225 kg	225 kg	225 kg	300 kg	
Dimensiuni somieră	100 x 206 cm	100 x 206 cm	100 x 206 cm	110 x 206 cm	
Funcții de reglare	90 x 200 cm	90 x 200 cm	90 x 200 cm	100 x 200 cm	
Dimensiuni somieră	   	   	   	   	

• Standard o Opțional x Nu este disponibil



SECURITATEA PATURILOR DIN SERIA IMPULSE


Directiva CE pentru Dispozitive Medicale
93/42 CEE

Paturi medicale reglabile
DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-52:2010

Aparate electromedicale
DIN EN 60601-1

Compatibilitate electromagnetă
DIN EN 60601-1-2

COMBINAȚII PENTRU TĂBLIILE DE PAT

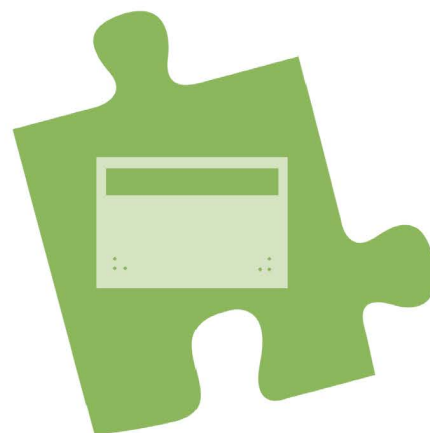

PARTICULARITĂȚI SPECIFICE

Tăbliile noastre de pat vă oferă libertatea de aplicare a combinațiilor preferate.

Asfel, din cele 4 serii de producție puteți obține, prin recombinarea elementelor de asamblare, 28 de configurații diferite.

Combinând decorurile adecvate veți avea un pat unic.

ELEMENTE DE DECOR*



Zadă de Schönau alb



Mesteacăn de Mainau



Salcâm de Lakeland deschis



Stejar Bardolino natur



Arjar auriu




Stejar de Ferrara natur



Fag




Stejar natur deschis

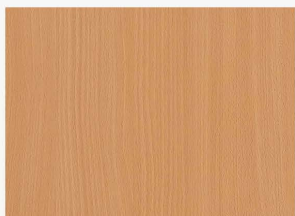

Fag de Bavaria



Cireș Roman

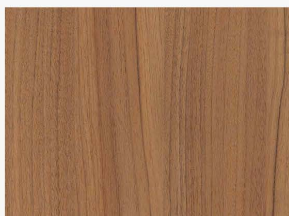


Nuc de Dijon natur



Merano natur



Cireș

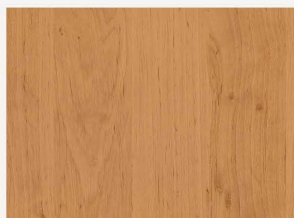

Arin

*alegere opțională de decor

POSIBILITĂȚI DE COMBINARE

La cerere se pot combina două modele opționale, oferind astfel o mare flexibilitate în adaptarea la mijloacele existente.

În plus față de modelele noastre standard, noi oferim contra cost zeci de elemente de decor special, la alegere.



Betten Malsch GmbH
Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck
Tel.: +49 (0)6626 / 915 100
Fax: +49 (0)6626 / 915 116
E-Mail: info@bettenmalsch.de

Malsch International SRL
Str. Thomas Masaryk 9, ap. 3
Sectorul 2 | RO-20983 Bucuresti
Tel. +40 (21) 2122004
Fax +40 (21) 2118159
E-Mail: info@malsch-int.com

www.bettenmalsch.de
www.malsch-int.com

